

INTEGRAÇÃO WEBSERVICE - ENVIO


Esse documento tem a finalidade de orientar no processo de integração do sistema da Hotsoft com os laboratórios de apoio via operação Webservice. Nessa operação não há necessidade de utilizar o sistema do apoio para envio ou recebimento de arquivos. Todo o processo é realizado dentro do sistema da Hotsoft.

Antes de iniciar, verifique se o seu laboratório de apoio possui essa funcionalidade* e depois execute a configuração da documentação do cadastro de laboratórios de apoio (site migracao.lablaucao.com.br > item 9-Lab. Apoio > item 2 - Cadastro Apoio/Pastas).


**Até o momento da criação desse documento (01/2017), a Hotsoft possui integração Webservice com os apoios Hermes Pardini e Diagnósticos do Brasil.*

Menu: Resultados > Mapa de trabalho ou Exporta Apoio.

Acesse o lote gerado para o laboratório de apoio e clique no botão "Exportar". As amostras serão enviadas diretamente para o sistema de comunicação do apoio (site). Deve aparecer a mensagem "Lote integrado com sucesso.". Qualquer mensagem diferente dessa, pode indicar algum erro de configuração.

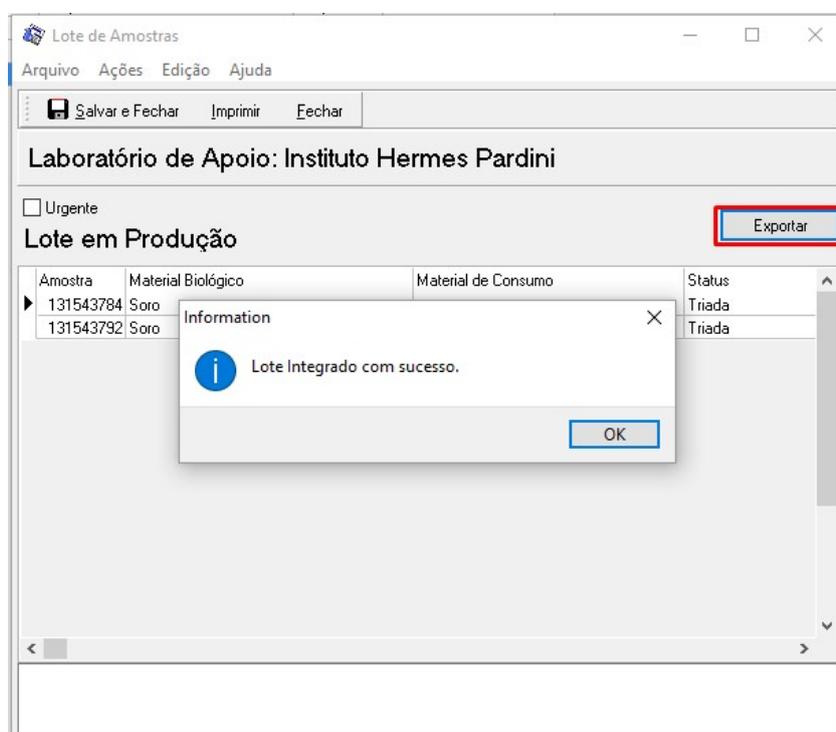


Após a exportação, no menu Ações > Imprimir Etiquetas Apoio, faça a impressão de todas as etiquetas das amostras. As etiquetas apresentadas são as do próprio apoio** e serão enviadas diretamente para a impressora configurada.

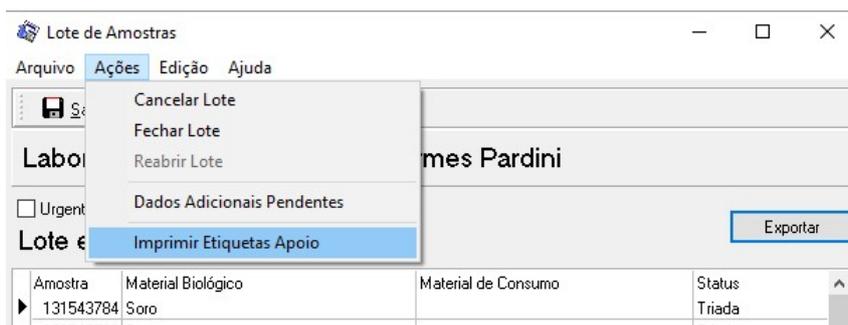

**Não há como alterar o modelo ou tamanho das etiquetas, pois já vem formatadas pelo laboratório de apoio.

A impressão de uma ou mais amostras específicas deve ser efetuada dentro do cadastro da amostra (menu recepção > requisições > acessar a requisição do paciente > aba 2-Amostras > botão Detalhes da Amostra > menu ações > Imprimir etiqueta apoio).

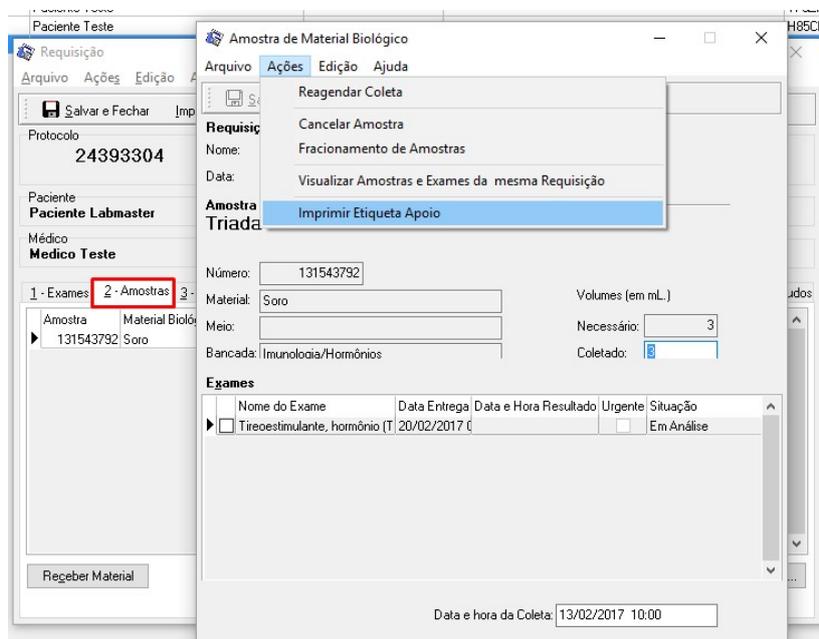

Observações:

- 1 - Verificar em qual máquina a etiquetadora está instalada para compartilhá-la (mesmo que o processo seja realizado na mesma máquina da etiquetadora).
- 2 - Dentro do sistema da Hotsoft, deve-se configurar a etiquetadora no menu Configurações > Parâmetros do sistema > aba 5 Configurações de impressão (Máquina) > campo Impressora Térmica Padrão.
- 3 - Inserir "" (aspas duplas) no caminho da etiquetadora (exceto quando o apoio for Hermes Pardini).

