


INTEGRAÇÃO NO SISTEMA DO APOIO HERMES PARDINI

Esse documento tem o intuito de orientar os usuários no processo de enviar e receber arquivos de integração no sistema do apoio. Esse treinamento é de responsabilidade do apoio, mas procuramos orientar nossos clientes para agilizar o processo de integração. Alertamos que o processo pode ser alterado pelo apoio, visto que o sistema de comunicação é deles.


EXPORTAÇÃO APOIO - GERAR ARQUIVO DE ENVIO

Antes de iniciar, no sistema da Hotsoft (Labplus/Labmaster), o usuário deverá gerar o arquivo de exportação dos exames destinados ao apoio. Geralmente será a pasta ENVIO.

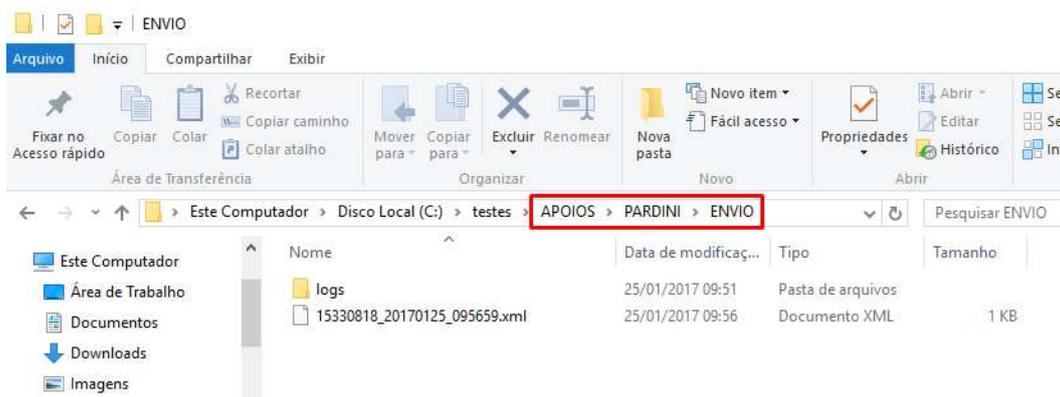


ACESSAR SISTEMA DO APOIO


Acesse o sistema do apoio. No caso do Pardini, o sistema está em forma de site. Acesse a aba APOIO A PARCEIROS e clique no menu HPSAX. Será solicitado um usuário e senha. Quem fornece esses dados é o apoio.

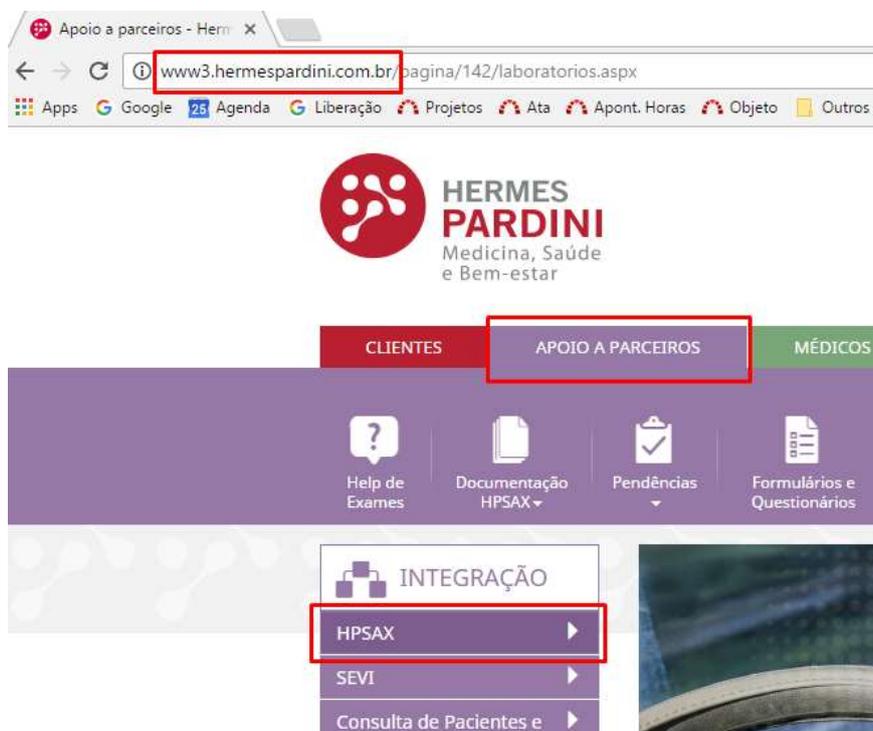


O usuário será destinado a uma página onde aparecerá uma listagem dos envios anteriores. Para fazer um novo envio, deve selecionar a opção Adicionar Lote Pedido.

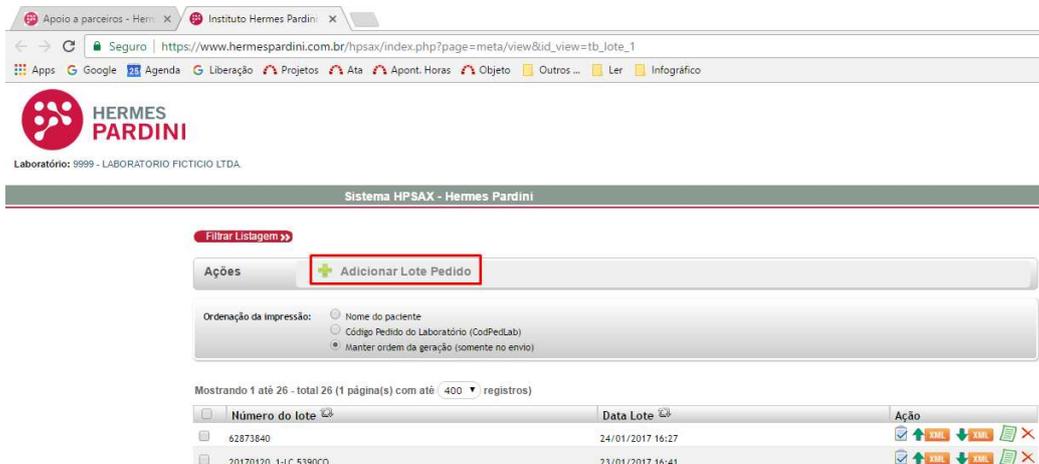

Clique em Escolher arquivo e localize o arquivo exportado pelo sistema da Hotosoft. Em seguida, clique em Enviar.

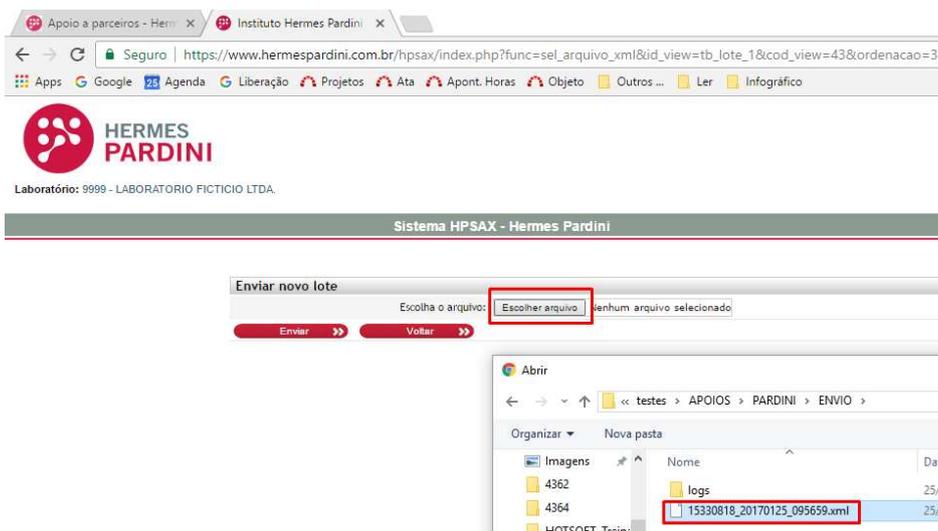

Deverá aparecer a seguinte mensagem:

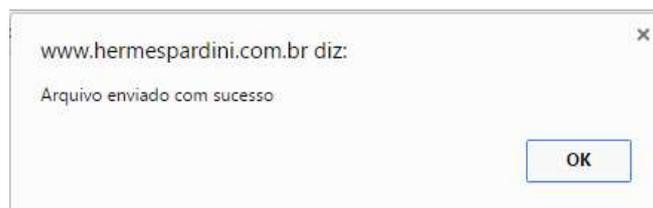

Se aparecer uma mensagem diferente desta, leia com atenção, pois pode ser algum problema na exportação do arquivo. Geralmente a própria mensagem orienta sobre o que precisa ser corrigido. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco para ajudá-lo.

Em seguida aparecerá a tela abaixo, mostrando que o arquivo exportado (lote) e seus pacientes já se encontram disponíveis para verificação, impressão de etiquetas, etc.

The screenshot shows the HPSAX system interface. At the top, there is a header with the logo and name 'HERMES PARDINI' and the text 'Laboratório: 9999 - LABORATORIO FICTICIO LTDA.'. Below this, a green bar indicates 'Sistema HPSAX - Hermes Pardini'. A table displays lot information:

Número Lote	Lote Apoio	Data/Hora
15330818	32378	25/01/2017 10:42:45

Below the table, there is a section titled 'Pedidos' (Requests). It shows a table with one entry:

Pedido	Data pedido	Código pedido Apoio	Paciente	Idade	Sexo	Ação
15472264	25/01/2017 09:51	9801590	Paciente Teste		Feminino	[Checkmark] [Print]

At the bottom of the 'Pedidos' section, there is a 'Voltar' button.

GERAR ARQUIVO DE RETORNO

Ainda dentro do sistema do apoio, vá até o menu Consulta de Pacientes e Resultados, para gerar os resultados disponíveis em forma de arquivo.

The screenshot shows the main menu of the Hermes Pardini system. The header includes the logo and the text 'HERMES PARDINI Medicina, Saúde e Bem-estar'. Below the header, there are three main menu categories: 'CLIENTES', 'APOIO A PARCEIROS', and 'MÉD'. Under 'APOIO A PARCEIROS', there are several options: 'Help de Exames', 'Documentação HPSAX', 'Pendências', and 'Formulário Questionário'. A dropdown menu is open under 'INTEGRAÇÃO', showing options: 'HPSAX', 'SEVI', and 'Consulta de Pacientes e Resultados'. The 'Consulta de Pacientes e Resultados' option is highlighted with a red box. To the right, there is a green banner with the text 'Se precisa gente no what' and a phone number '(31) 9...'.

Na opção Resultados por período, o usuário deve informar o período em que os resultados foram liberados, assinalar a opção Resultados e clicar no botão OK. Se essa rotina for feita diariamente, o período de liberação será sempre o dia anterior até o momento da geração do arquivo. Atente-se ao campo de horas.

Resultados por período

Informe o período de liberação:

De: 22/01/2017 01:00:00

Até: 25/01/2017 10:49:26

Arquivo texto

Arquivo XML

Resultados

Dados constantes

Gráficos

Unidade junto c/ valor

Modelos

Exames solicitados

Todos os exames

Impressão formatada


Papel timbrado

PDF PCL


Lembrar data time

ok

A página de internet, que estiver usando, vai baixar o arquivo e salvar numa pasta configurada para downloads. Acesse a opção Mostrar na pasta, ou vá até a pasta configurada para downloads no seu computador.

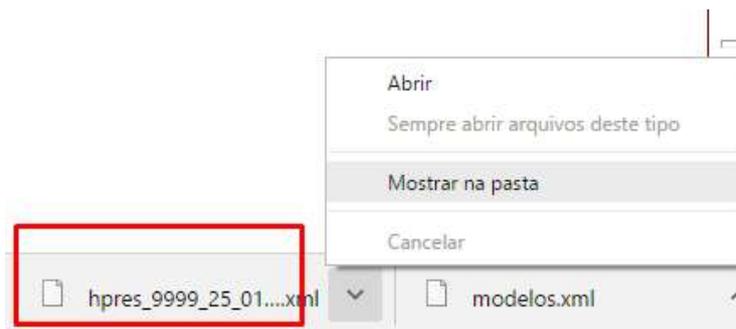

Localize o arquivo baixado e o recorte e cole na pasta destinada ao processo de leitura de retornos no sistema da Hotsoft. Geralmente será a pasta RECEB.

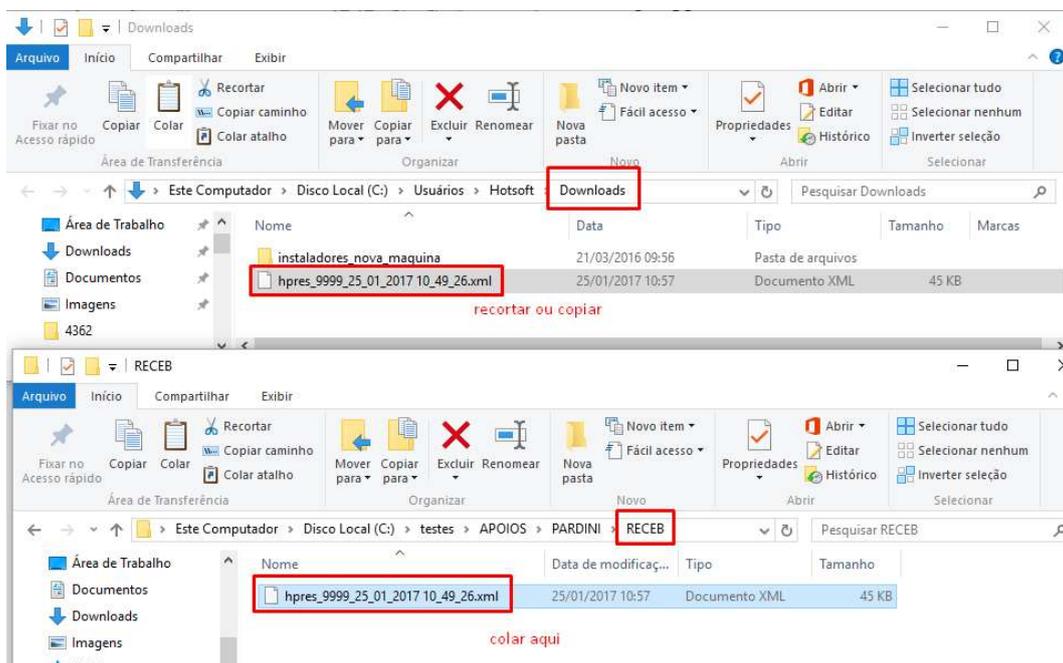

IMPORTAÇÃO APOIO – LEITURA DOS RESULTADOS

Quando o arquivo estiver posicionado na pasta correta, entre no sistema da Hotsoft e faça a importação desse arquivo. Pelo menu Resultados > Importação apoio.